

کد F3003

ویرایش 01



شرکت ایران ممکو

هشدارهای توصیه ای



لنزومتر دستی تاپکان مدل

LM - 8

IRAN MEMCO

ADVISORY NOTICES

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شرکت « ایران ممکو » نمایندگی انحصاری محصولات تاپکان در ایران تماس حاصل فرمایید .
نشانی: تهران - خ بزرگمهر - پلاک ۴۴ تلفن: ۰۲۱-۶۶۴۰۳۶۶۰ فاکس: ۰۲۱-۶۶۴۰۷۰۹

نمایه های ایمنی :

به منظور استفاده ایمن از این محصول ، هشدارهای مهم در دفترچه راهنمای آن نوشته شده و ارائه گردیده است .

پیشنهاد می شود که قبل از خواندن متن و " هشدارهای ایمنی " مفهوم اشکال زیر رادرک کنید.

نشانه	مفهوم
-------	-------



نادیده گرفتن این علامت ممکن است منجر به صدمات شخصی و آسیب های احتمالی گردد .

- صدمات شخصی شامل جراحت ، سوختگی ، شوک الکتریکی و غیره می باشد .
- آسیب های احتمالی شامل آسیب های جدی به ساختمان یا تجهیزات می باشد .

نشانه	مفهوم
-------	-------





این علامت نشانه احتمال وقوع خطر می باشد . هشدارهای مورد نظر را با کلمات یا نشانه دیگری در داخل علامت و یا حتی نزدیک به آن بیان می کند .

موارد بازدارنده :




احتیاط

موارد پیشگیری	نشانه ها
هنگام متمایل سازی دستگاه، احتیاط کنید که انگشتانتان مابین اجزای دستگاه گیر نکند .	
جهت جلوگیری از شل شدن/ افتادن اجزای دستگاه، آن را به آرامی در زاویه دلخواه متمایل سازید.	


راهنمای سریع کاربری دستگاه

۱) ابتدا با چرخاندن Ring، چشمی را طوری تنظیم کنید که خطوط مشکی Scale واضح دیده شود سپس کلید Power را بزنید تا دستگاه روشن شود. مطمئن شوید باتری مناسب داخل دستگاه قرار دارد.


۲) لنز مورد نظر را در قسمت مربوطه قرار دهید و توسط Lens Holder و Lens Table آنرا در محل صحیح خود ثابت نگه دارید.

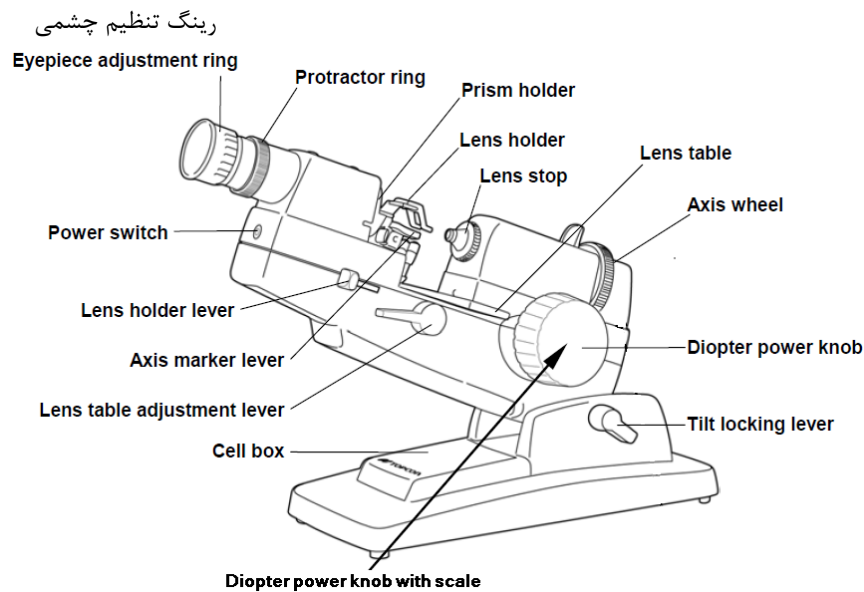

۳) با استفاده از Diopter Power Knob و Prism و Axis Wheel و بایستی Target سبز رنگ دقیقاً در مرکز قرار گیرد و وضوح لازم را داشته باشد، سپس عدد دیوپتر و زاویه محور را در پنجره درجه بندی بخوانید.

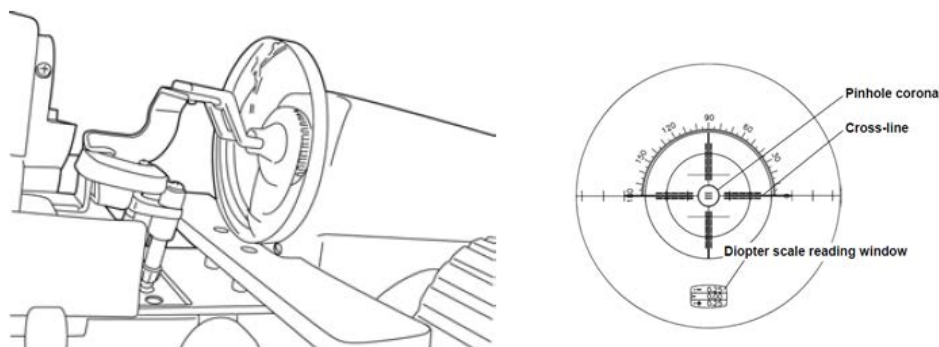

۴) جهت افزایش طول عمر باتری‌ها پنج دقیقه پس از روشن کردن دستگاه بطور خودکار خاموش می‌شود. در صورت نیاز توسط کلید Power مجدداً آن را روشن کنید. استفاده از باتری نامرغوب باعث اختلال در عملکرد مناسب دستگاه خواهد شد.

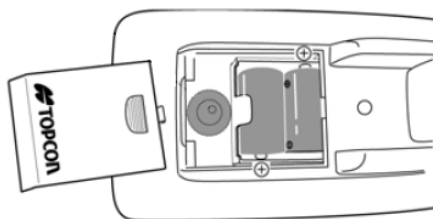

۵) پس از اتمام کار با دستگاه با استفاده از کلید Power دستگاه را خاموش کنید.

۶) برای انجام تنظیمات و آگاهی از جزئیات و اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنما مراجعه کنید.

نگهداری

- کارتریج جوهر را بر طبق دفترچه راهنمای انگلیسی جایگزین کنید .

تمیز کردن :

- برای تمیز کردن دستگاه ، از یک تکه پارچه سیلیکونی نرم و خشک استفاده نمایید .
- به هیچ وجه از محلول های فرار (بنزین، تینر و غیره) و گردگیرهای شیمیایی استفاده ننمایید.

تنظیم و بررسی :

از آنجاییکه دستگاه یک ابزار اپتیکی دقیق می باشد، آن را دور از ارتعاشات و تکانهای شدید نگهدارید .

تنظیم هدف:

زمانی که دستگاه بدون وجود لنز، فوکوس شده و مرکز هدف و درجه بندی چشمی منطبق باشند، تنظیم آن به درستی صورت پذیرفته است. اگر هدف در مرکز نباشد و با حرکت هدف مرکز آن جابجا شود، تنظیم آن نیاز به تجربه و مهارت دارد. برای این کار با واحد خدمات پس از فروش تماس بگیرید .

نگهداری دوره ای توسط واحد خدمات پس از فروش :

جهت اطمینان از عملکرد صحیح دستگاه و صحت اندازه گیری، سرویس اپتیکی و سایر موارد، بازدید دوره ای و پیشگیرانه PM هر سال یکبار توصیه می گردد.

توجه:

در صورت بروز هر گونه اشکال در دستگاه ابتدا به قسمت Trouble Shooting دفترچه راهنمای مربوطه مراجعه شود و چنانچه موفق به رفع اشکال نشدید از دستکاری و اقدام به تعمیر خودداری نموده و سریعاً موضوع را به واحد خدمات پس از فروش شرکت اطلاع دهید. در غیر اینصورت شرکت مسئول جبران خسارات وارده احتمالی نخواهد بود.